




セラフィナFを使用するとなぜ痛みが緩和するのですか？



人は、痛みや刺激を感じると脊髄内を通り、脳で知覚していきます。下の図の様に、痛みを感じると痛みの門を通して脳に伝達されます。

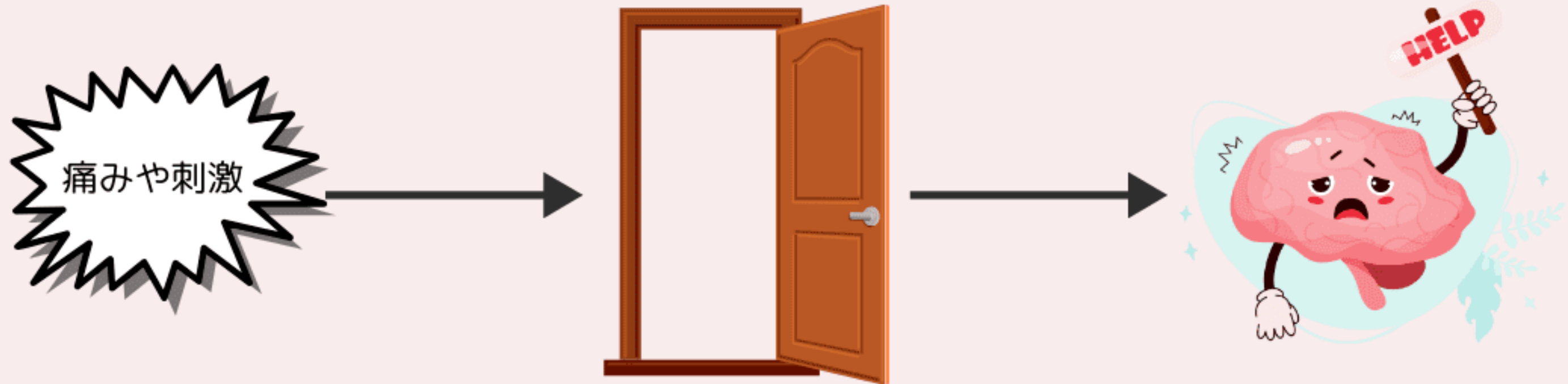

しかし、本製品を使用してTENSの刺激を与える事で、痛み  
の門の前で痛みを防御（ブロック）し、門を閉じることがで  
きるのです。



また、TENSは同時に痛みの緩和物質であるエンドルフィンの  
生成を助ける役割も担っています。この緩和物質が増える  
事で、持続した痛みの緩和が可能となります。



セラフィナFのココが良い！



① 効果を得られるまでの時間が短い！

通常、服薬した場合は20～30分程度かかるが、痛みが出てから使用し、わずか数分程度～効果を得ることが出来ます。

② 副作用の心配が無い！

服用した場合、眠気・だるさ・胃の痛みなどの症状が出る場合がありますが、そういった心配はありません。

③ 軽量・小型コンパクト！

治療しているとは思われない程の小ささと、上着を着用する事で隠せるので、心配な方も安心♪

使い方はとっても簡単です！

1st step



粘着電極シートをプラスチックシートから剥がし、患部へシートを装着させます。

2st step



0～5のモードボタンを選択し、出力強度を調整します。

3st step



ウエスト部分などに取り付けしていつも通り、仕事や家事等をします。



## モード選択について教えて！

| プログラム | 周波数 (Hz) | パルス幅 ( $\mu s$ ) | 治療時間 (分) |
|-------|----------|------------------|----------|
| 0     | 2.5~120  | 50~330           | 30       |
| 1     | 2.5~120  | 50~330           | 60       |
| 2     | 60~120   | 170~330          | 30       |
| 3     | 60~120   | 170~330          | 60       |
| 4     | 2.5~100  | 50~330           | 30       |
| 5     | 2.5~100  | 50~330           | 60       |

本製品は、0~5の6つのモードがあります。  
それぞれ、出力される電流の間隔やリズム、治療時間が異なります。

そのときの月経痛の痛みにあった電流の間隔や電流のリズムがあります。

ご自身で「心地よい」と思うリズムや間隔を見つけることが、大切になってきます。